

PP酸碱存储柜



产品介绍

PP强酸强碱存储柜, 特别针对强腐蚀性化学品的存储和防渗漏而设计, 使用存放具有强腐蚀性的化学品物质。

例如: 六大强酸【盐酸(HCl)、硝酸(HNO₃)、硫酸(H₂SO₄)、高氯酸(HClO₄)、氢溴酸(HBr)、氢碘酸(HI)】; 四大强碱【氢氧化钠(NaOH)、氢氧化钾(KOH)、氢氧化钡(Ba(OH)₂)、氢氧化钙(Ca(OH)₂)】。

产品特性

- 1、具有耐强酸强碱与抗腐蚀的特性, 耐冲击, 不生锈。
- 2、双锁结构, 锁体配有防腐、防水套件, 提供更高的安全保障。
- 3、柜门贴有醒目的“腐蚀性”警示标识。
- 4、柜内层板可单独取出, 方便清理, 也可在标配基础上增配层板, 增强空间使用率。
- 5、柜体一体成型无缝焊接, 极大的加强了柜体的结构性, 有效降低了柜体因热胀冷缩而引起的变形。
- 6、规范管理, 分类存储不同性质及危险等级的化学品。
- 7、降低环境污染, 保护操作人员的人身安全。

产品说明

1、整体材质

柜体: 采用8mm瓷白色贴膜PP(聚丙烯)板制作, 具有卓越的耐腐蚀性, 经同色焊条一体成型无缝焊接处理, 保证柜体之坚固及密封性。

柜门: 采用15mm瓷白色贴膜PP(聚丙烯)整板制作, 使用寿命长, 质量有保证。

层板: 采用瓷白色PP(聚丙烯)板制作, 四周有立边, 一次注塑成型。整体设计为活动式, 可随意抽取放在合适的隔层, 自由组合各层空间, 四周立边可获得一定程度的防溢效果。

2、配件

桥式把手: 采用耐酸碱PP(聚丙烯)材质, 耐腐蚀性能好。

铰链: 采用经射出成型的PP(聚丙烯)材料制成, 耐腐蚀性能好, 外观精美且有多种颜色可选。

专用门吸: 采用PP(聚丙烯)材料制成, 使用寿命长, 质量有保证。

警示标签: 柜门贴有醒目的“腐蚀性”警示标示, 提醒周围人群注意安全。

3、备注


可以用于各种腐蚀性化学品的储存, 如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等。



防腐防水套挂锁



桥式把手

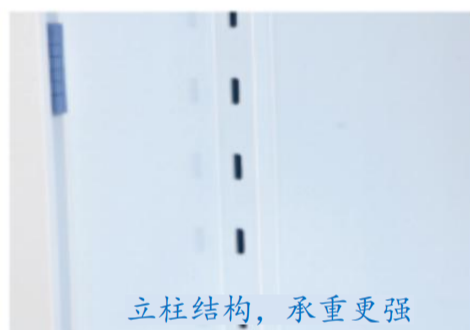


立柱结构，承重更强



铰链



网格加强筋结构层板

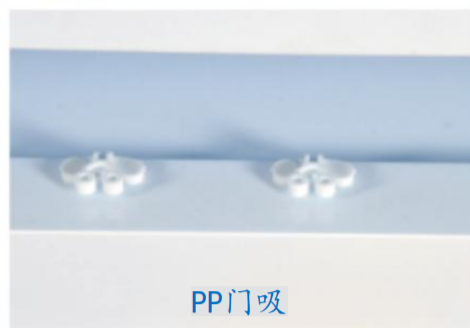

PP门吸

维护保养

- 1、柜内化学品应一直存放在密闭容器内
- 2、使用吸附棉等泄漏防控用品及时清理内部溢出物
- 3、务必保证柜体平衡，尽量选择靠墙角或背靠墙立地置放
- 4、保证柜门完全能够操作
- 5、不要用尖锐锋利的硬物刻划柜体
- 6、放置于室内干燥通风的环境中
- 7、不要暴露于明火，熔融金属，金属火花或直射阳光下
- 8、建议采用温水或性质温和的清洁剂清洗产品
- 9、不要长时间在温度超过100℃的环境下操作，否则会引起柜体性能退化或损坏

基本参数

产品型号	规格尺寸H*W*D (mm)	重量 (kg)	标配层板	门型	锁具
TL-PP890	890*590*460	32	1	单门	双锁
TL-PP1650	1650*590*460	33	3	单门	双锁
TL-PP1800	1800*900*450	55	2	双门	双锁
TL-PP1800 (四门款)	1800*900*450	55	2	四门	四锁
TL-PP2000F (过滤款)	2000*900*450	75	2	四门	四锁

注：更多规格型号，请来电咨询。

过滤款配置说明：

智能控制系统:EVIEW七英寸液晶触摸屏微电脑控制系统，实时温湿度环境监控，风机监控，VOC浓度环境监测系统及一体化报警系统。

a.温湿度数字显示设定和测量值，高精度传感器，当柜内的温湿度超过设定的测量值即时报警提示。

b.美国进口PLC风机，24伏电流，性能稳定，超静音，无火花静电。

c.高效过滤系统，按照颗粒大小选择排列分布，遵循ASTM标准，有效针对酸性气体和有机气体，吸附能力强，针对粒子过滤器，采用高效HEPA过滤器，对大于0.3um的粒子，过滤效率达99.995%。